



DIAGNOSTICS PVT. LTD.  
(PATHOZYME GROUP OF COMPANY)

**SMART-7**  
**A D V A N C E**

Máy phân tích sinh hóa



**Máy phân tích sinh hóa hiệu suất cao**  
**Tương thích với tất cả các hóa chất sinh hóa**



**KẾT QUẢ CHÍNH XÁC**

Độ chính xác cao nhất



**TIẾT KIỆM CHI PHÍ**

Tiêu thụ hóa chất thấp




**THÂN THIỆN NGƯỜI DÙNG**

Dễ dàng sử dụng

Smart 7 Advance là máy phân tích sinh hóa lâm sàng với các tính năng mạnh mẽ trong một Thiết bị nhỏ gọn...

### MENU CHÍNH

Smart 7 Advance là máy phân tích có nhiều tính năng và mức hiệu suất khác nhau để phù hợp với mọi ứng dụng. Màn hình đồ họa TFT 7" mang đến sự thuận tiện thực sự khi vận hành và giảm sai sót khi nhập dữ liệu. Phần mềm thân thiện với người dùng với khả năng tương tác Giao diện người dùng đồ họa Phím tắt cho Menu để thao tác dễ dàng hơn.

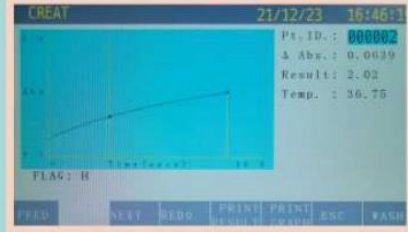


### HIỆU CHUẨN

Có sẵn nhiều loại Hiệu chuẩn khác nhau như đường cong hiệu chuẩn K-factor, Tuyến tính và Phi tuyến tính như Cubic Spline, Logit-log, Point to point cho phép Smart 7 Advance chạy nhiều xét nghiệm sinh hóa và miễn dịch - độ đục.

### TÌM KIẾM KẾT QUẢ

Dễ dàng truy cập và tìm kết quả bệnh nhân bằng cách: Xem kết quả theo ID, xem kết quả theo Ngày và xem kết quả theo Test

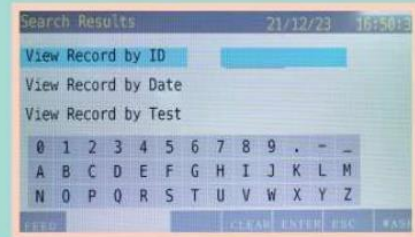

### Đặc tính kỹ thuật:

<b>Loại xét nghiệm</b>	End Point, Fixed Time, Rata A, Two Point Non Linear, Sample Blank, Multi-standard, Coagulation, Absorbance
<b>Bước sóng</b>	Tự động bằng đĩa kính lọc 8 vị trí, 7 kính lọc chuẩn: 340 nm, 405 nm, 505 nm 546 nm, 578 nm, 630 nm, 670 nm 10 nm và 1 vị trí trống cho kính lọc tùy chọn Băng thông hẹp < 8 nm Ánh sáng nhiễu: < 0.3 tại 340 nm
<b>Dãi quang</b>	0.1 – 3.000 Abs
<b>Thể tích hút</b>	300 µl – 1000 µl
<b>Flow Cell</b>	Thép không rỉ với cửa sổ thạch anh, thể tích đo 32 µl, đường dẫn quang 1 mm
<b>Bộ ủ nhiệt</b>	Tích hợp bộ ủ nhiệt 10 vị trí
<b>Bộ nhớ lưu trữ</b>	120 Chương trình, 25000 mẫu với đường cong phản ứng, Kết quả QC
<b>Nguồn đèn</b>	Đèn Halogen Tungsten 12V/20W
<b>Kiểm soát nhiệt độ</b>	25, 30, 37°C bằng hiệu ứng Peltier
<b>Hiển thị</b>	Màn hình màu LCD cảm ứng 7 inch TFT, độ phân giải 800x480 Pixels
<b>Máy in</b>	Tích hợp máy in nhiệt (có thể TẮT/MỞ theo mong muốn)
<b>Nguồn cung cấp</b>	Nguồn bên ngoài (15V-8A) 100 – 240VAC ± 10%, 50/60 Hz, 60W
<b>Điều kiện làm việc</b>	Nhiệt độ: 15°C – 40°C, Độ ẩm: lên đến 85% (RH)
<b>Trọng lượng</b>	Khoảng 5.5 kg

## Orbit Diagnostics Pvt.Ltd.

Plot No. A-115, Kagal- Hatkangale Five Star MIDC area, Kagal,  
Dist. Kolhapur- 416 216 (MS), India  
Telefax : 0231-2305072,  
E-mail: orbit@pathozyme.com

### Nhà phân phối:

**CÔNG TY TNHH TM THIẾT BỊ Y TẾ VẠN KHANG**  
68 Đường số 12, Khu phố 5, Phường Hiệp Bình Chánh,  
TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh  
ĐT: 0823-7260 786 Fax: 0283-7260 959  
Web: vakamed.com – email: vakamed@vakamed.com